




## Large Blood Pressure Cuff

For all Microlife upper arm blood pressure monitors.



Thank you for purchasing a Microlife accessory cuff. This cuff is suitable for arm circumferences of 13" to 17". The cuff is easy to adapt to all units.

For automatic units simply remove the existing cuff from the monitor and plug the large cuff into the monitor.

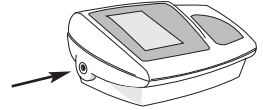




### For manual inflation monitors follow these steps:

1. Remove the T connector from the unit.
2. Detach the hose that leads to the cuff.
3. Remove the connector on the end of the new cuff.
4. Attach replacement cuff's hose to the T connector  
Then connect the T connector to the monitor.

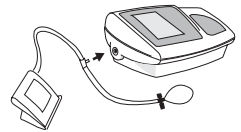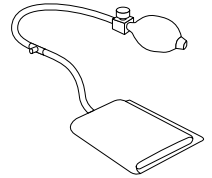

### Once the cuff is properly connected to the monitor, prepare the cuff for your measurement.

1. Thread cuff end through metal loop and slide cuff onto left arm. The cuff is properly placed when the bottom edge is just above the elbow crease.
2. Fasten the Velcro just tight enough so you can slide two fingers under the cuff.
3. Sit comfortably and rest arm at heart level with palm up.

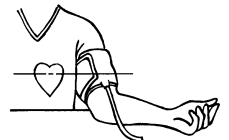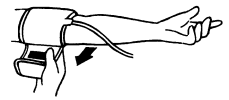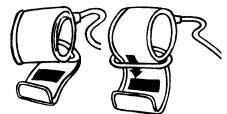

**Be sure to consult the instruction booklet included with your monitor for correct use of your blood pressure monitor.**

**Questions? Call the Customer Help Line Toll Free at 1-800-568-4147.**




## Brazalete de Presión de Tamaño Grande

Para todos los tensiómetros de brazo.



Gracias por comprar un brazalete de Microlife. Este brazalete es para brazo de circunferencia 13" a 17". El brazalete es fácil de adaptar a todas las unidades.

Para las unidades automática simplemente remueve el brazalete existente del monitor y conecte el brazalete de tamaño grande en el monitor.

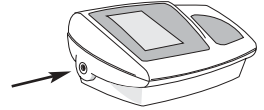




**Para el monitor de inflación de bulba sigue los siguientes pasos:**

1. Remueve el conector T de la unidad.
2. Quite la manguera que dirige la unidad.
3. Remueva el conector al final del nuevo brazalete.
4. Conecte el brazalete de la manguera del brazalete de reemplazo a el conector T. Entonces conecte el conector T a el monitor.

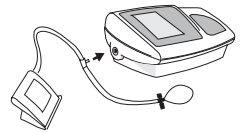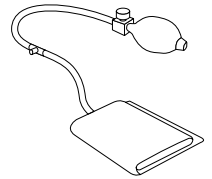

**Una vez el brazalete es apropiadamente conectada a el monitor, prepare el brazalete for su medición.**

1. Desenrolle el final del brazalete hasta el anillo de metal y deslice el brazalete en el brazo izquierdo. El brazalete es apropiadamente puesto cuando la orilla de abajo es justamente arriba de la cresta del codo.
2. Abroche el Velcro justamente apretado que pueda deslizar dos dedos dentro del brazalete.
3. Sientase comodamente y descanse el brazo al nivel del corazón con la palma hacia arriba.

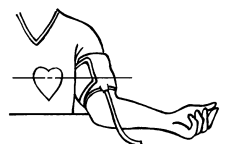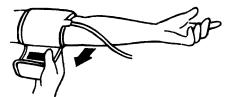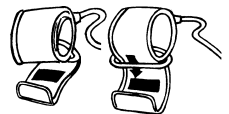

**Este segura de consultar con el manual de instrucciones incluida en su monitor para el uso correcto de su tensiómetro.**

**¿Las preguntas? Llame la Línea de Ayuda de Cliente Gratuita en 1-800-568-4147.**